

# tips & tricks

## praktische tips voor gebruik

- Zet de benen van de lift altijd open als je een persoon verplaatst. Dit verhoogt de stabiliteit van de lift.
- Trek na het opladen de stekker uit het stopcontact.
- Laad de accu van de lift wekelijks volledig op.
- Check altijd voor gebruik of de accu nog genoeg is opgeladen. Het lampje brandt dan groen.

## wat te doen bij problemen

### De lift rijdt niet:

- Staan alle remmen los?

### Ik heb geen tildoek meegekregen:

- Contacteer onze uitleendienst.

### Mijn handbediening werkt niet meer:

- Is de accu nog genoeg opgeladen?
- Steekt de stekker nog in het stopcontact? Als de lift aan het opladen is dan werkt hij niet.
- Zit de fiche van de handbediening los?
- Stond er spanning op het stopcontact tijdens het opladen? Is de stop in je meterkast afgesprongen?
- Staat de rode noodknop op vrij? Zo nee, draai de knop naar rechts totdat je een klik voelt en de knop naar voren komt.

### Toch nog een probleem of vraag?

Bel naar het nummer 03 205 69 29.

Je vindt dit nummer ook op de sticker op de tillift.

# hier al aan gedacht?

## meer comfort

- toiletstoel
- stoel met eettafel
- pyjama met rits op de rug



## gemakkelijker verzorgen

- verpleegdeken
- douchestoel
- aangepast servies rood
- 2-in-1 dekbed
- glijdlakens



**Goed thuiszorgwinkel**  
[www.goed.be/thuiszorgwinkel](http://www.goed.be/thuiszorgwinkel)  
03 205 69 29  
uitleendienst: [goedgeholpen.be](http://goedgeholpen.be)

## onze webshop is altijd open

Bestel en reserveer 24/7 op  
[www.goed.be/webshop](http://www.goed.be/webshop).  
Haal je bestelling af bij Goed  
of laat ze thuis leveren.

## maak kennis met onze andere diensten

**Goed apotheek**  
[www.goed.be/apotheek](http://www.goed.be/apotheek)  
Reserveer je medicijnen op  
[www.goed.be/webreservatie](http://www.goed.be/webreservatie).

**Goed hoorcentrum**  
Kom langs voor een **gratis hoortest**.  
Maak je afspraak op [www.goed.be/hoorcentrum](http://www.goed.be/hoorcentrum)  
of **03 205 69 20**. Je kan nu ook een afspraak  
maken voor een **videoconsultatie**.


meer info op [www.goed.be](http://www.goed.be)

# montage en gebruikerstips

## passieve tillift

### Invacare Birdie (compact)

Bedankt om via Goed een passieve tillift te ontlend. Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om de tillift op een correcte manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren indien je bijkomende vragen hebt. Een passieve tillift wordt gebruikt om personen te tillen en te verplaatsen die zelf niet meer kunnen steunen. De verplaatsing van de zorgbehoevende persoon gebeurt volledig door de lift en de assistentie van de zorgverlener. Je kan een passieve tillift gebruiken om een persoon met de hulp van een tildoek vanuit een ligpositie naar een half-zittende of zittende houding te brengen, en omgekeerd.

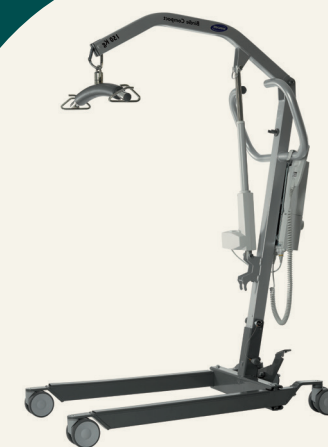

+ 1 tildoek

**goed**  
samen met

## stap 1 aanbrengen tildoek (toiletsling)



1 Steek de tildoek achter de rug met de lange flappen naar beneden en de toiletsling naar voren.



2 Zorg dat de bovenkant van het doek gelijk is met de oksel.



3 Neem de linkerhelft van de band met gesp en steek ze onder de armen door.



10 Rij de tillift naar voren en duw met je voet op de rechterpedaal zodat de poten open gaan.



11 Rij de tillift met geopende poten recht voor de rolstoel.



12 Check of de rolstoel volledig tussen de poten staat. Duw dan met je voet de 2 remmen vast.



4 Neem de rechterhelft van de band met gesp en steek ze onder de armen door.



5 Sluit de band stevig met de velcro's.



6 Klik de veiligheidsgesp vast en trek de band aan.



13 Laat de hijsarm zakken. Plaats het tiljuk van de hijsarm dichtbij de gebruiker. Op de hoeken van het tiljuk zitten bevestigingshaken.



14 Aan de rugband zitten 4 ophangbanden met lussen met kleurcodes. Met de kleurcodes bepaal je de juiste lengte van je lus.



15 Kies een kleurcode. Duw de lus in de bevestigingshaak.



7 Steek de zijkanten onder de armen door en leg de flappen op de benen.



8 Steek de linkerflap onder het linkerbeen door.




9 Draai de flap verder door over het linkerbeen. Doe nu hetzelfde voor het rechterbeen.



16 Trek de lus naar de onderkant van de haak. Doe dit ook voor de andere kant. Let op dat je dezelfde kleurcode kiest.



17 Steek bij de benen de ene ophangband door de andere (kruisen). Dit voorkomt dat de benen open gaan bij het hijsen.

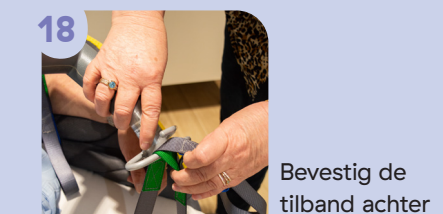

18 Bevestig de tilband achter de rug van de zittende gebruiker.

## stap 2 verplaatsen van de gebruiker



1 Zo ziet het resultaat eruit. Check voor het hijsen of de rolstoel op de rem staat.




2 Laat de gebruiker het tiljuk vastpakken. Hijs omhoog.



3 Doe de remmen los en verrijd de gebruiker.



4 Positioneer hem mooi boven het midden van het bed.

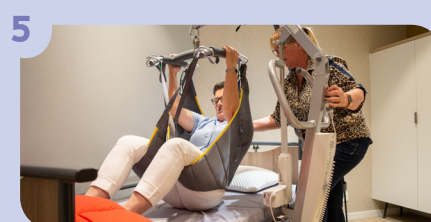

5 Laat de gebruiker zakken. Met het handvat aan de rugband kan je bijsturen.



6 Maak de 4 lussen los van de bevestigingshaken.

## stap 3 verwijderen tildoek



1 Breng het bed omhoog tot bekkenhoogte.



2 Kruis de linkerarm over de rechterarm en het linkerbeen over de rechterbeen.



3 Rol de gebruiker aan de heup en schouder naar je toe op zijn linkerzijde.



4 Breng het doek zo ver mogelijk onder de gebruiker.



5 Rol de gebruiker terug op de rug. Kruis de rechterarm over de linkerarm en het rechterbeen over het linkerbeen. Rol de gebruiker op de rechterzijde. Trek nu het doek onder de gebruiker vandaan.